

Orion Clean Card® PRO

# 30 Sekunden

für Sicherheit und Sauberkeit



Reinigungskontrolle  
leicht gemacht ...



# Reinigung + Kontrolle = Sicherheit

## Sicherheit

Optimieren Sie die **Sauberkeit** mit einer aktiven eigenverantwortlichen Ergänzung zu den gesetzlich vorgeschriebenen Abklatschproben.

**Reinigungs-Schnellkontrolle ohne Wartezeit,  
keine Laborkosten, sofort sichtbares Ergebnis.**

Die DIN 10516 (Lebensmittelhygiene: Reinigung und Desinfektion) gibt hier die Hilfestellung mit den Methoden zur Überwachung der Reinigungswirkung (u.a. Proteintest) und den Methoden zur Überwachung der Desinfektionswirkung (Tupfer- oder Abklatschproben).

## Hoher Standard

Steigern Sie die Eigenansprüche für Ihren Betrieb.  
Machen Sie den ersten Schritt

**zum Vorteil von Betrieb, Mitarbeitern und Kunden.**

## Kosteneinsparung durch Vorbeugung

Investieren Sie in **Qualitätssicherung**, damit Sie sicher Kosten einsparen und vermitteln Sie Hygiene positiv an das Personal.



Verantworten Sie mit gutem Gewissen die Qualität Ihrer Reinigungsmaßnahmen und sehen Sie einer Kontrolle entspannt entgegen.

**Clean Card® PRO wird empfohlen  
vom Bundesverband der  
Lebensmittelkontrolleure e.V.**






# Sicherheit in 30 Sekunden

Proteinhaltige Verschmutzungen und Reinigungs- oder Desinfektionsmittelreste auf optisch sauberen Flächen sind Futter für die Keime.

Reduzieren Sie dieses Gefährdungspotential durch eine simple Nachkontrolle und eine sofortige Reaktion.




„sauber?“- oder „nicht sauber?“

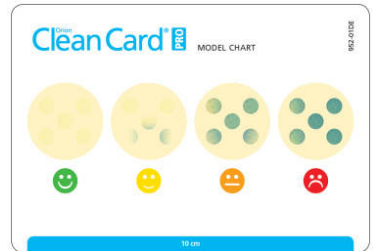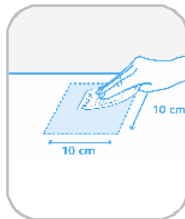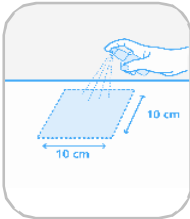

Die Clean Card® PRO zeigt,  
was mit bloßem Auge nicht zu sehen ist.

- **Unkompliziert durchzuführender Abreibe-Test**
- Aufdecken von Reinigungsdefiziten und Schwachstellen
- Schulungsinstrument zur Sensibilisierung des Personals
- Zusätzliche Motivation durch schnelle Visualisierung
- Betriebsinternes Qualitätssystem, zur Eigenzertifizierung
- Eingliederung in die Konzepte nach ISO, HACCP, IFS oder BRC Standards, GHP oder interne Hygienepläne
- Dokumentation mit Clean Card® PRO Testprotokoll
- **Einfaches Nachreinigen spart Zeit, Ärger und Geld**

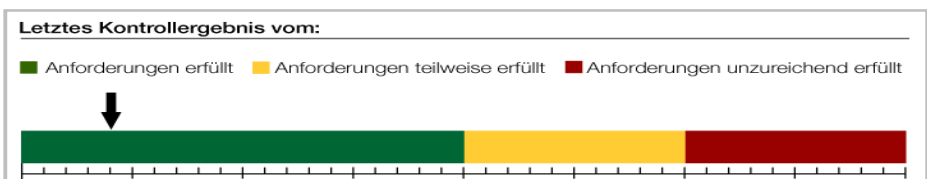

Mit der Clean Card® geht die Ampel weiter auf GRÜN



Alleinvertrieb durch:

**amfora health care GmbH**  
 Produkte und Dienstleistungen  
 im Bereich Hygiene

Berchinger Str. 13  
 D - 92342 Freystadt

[www.amfora-health-care.de](http://www.amfora-health-care.de)  
[www.hygiene-schnelltest.de](http://www.hygiene-schnelltest.de)

Clean Card PRO<sup>®</sup> Test-Protokoll

Schrittweise: 1. bis zum Tropfen Clean Card<sup>®</sup> PRO die zu testende Fläche vollständig befeuchten. 2. bis zum Tropfen mit sauberen Händen abwischen. 3. 1.

Testergebnis:

Checkliste Reinigungsgrad

D U: Raum:	
Geplantes Datum	
exakter Position	
Laden	
Unterart	
Ausführende	
Handhygiene <small>Handhygiene erfolgt, wenn mit sauberen Händen abgewischt wird</small>	Nichtberührend bedient <small>Handhygiene erfolgt</small> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Handtuchbenutzung <small>Handtuchbenutzung erfolgt</small>	Nichtkontakt-Abfall <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Nachkontrolle erfolgt von: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Nachkontrolle erfolgt von: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Desinfizier-/Wirkstoff: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Nach langjährig überprüfbar sein: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Copyright amfora Health Care 2019-24

Kooperations-Partner:



Mitglied im

